

DANFLOW™ 3000 PLUS

En trådløs urinflowmåler direkte til computer


DanFlow™ 3000 Plus er et moderne og enkelt system til flowmåling, som installeres på en af klinikens egne computere. Du angiver patientens navn og personnummer i DanFlow™ 3000 Plus programmet og du kan se patientens flowkurve direkte på skærmen. Du slipper for alle udskriftsstrimler på termopapir og kan i stedet generere rapporten direkte som en PDF-rapport, som du kan gemme præcist hvor du ønsker (på en server, på netværket, på computeren, i journalsystemet) eller skrive ud på en printer.

Flowtransducere transmitterer data via en unik, trådløs kommunikationsprotokol (866 MHz) direkte til din computer og en komplet flowrapport gemmes som PDF-rapport i en mappe, som du selv angiver. Denne rapport kan importeres i de fleste moderne journalsystemer.

Flowtransducere i DanFlow™ 3000 Plus systemet er udstyret med et lithiumbatteri, som ikke skal oplades og som ved normal drift kan anvendes i mindst 2 år. Flowtransducere kan anvendes med et hæve-/ sænkbar stativ, men kan også sættes direkte på gulvet under en miktionsstol med tragt.

DanFlow™ 3000 Plus har følgende fordele:

- Patientens flowmåling vises on-line på din computer og markører kan justeres for at eliminere artefakter
- Batteridrevet, trådløs flowmåler med lang drifttid
- Lang rækkevidde mellem flowtransducer og hovedenhed (op til 50 meter)
- Rapporter i pdf-format genereres automatisk og gør det muligt at gemme direkte i journalsystem og-/eller udskrift

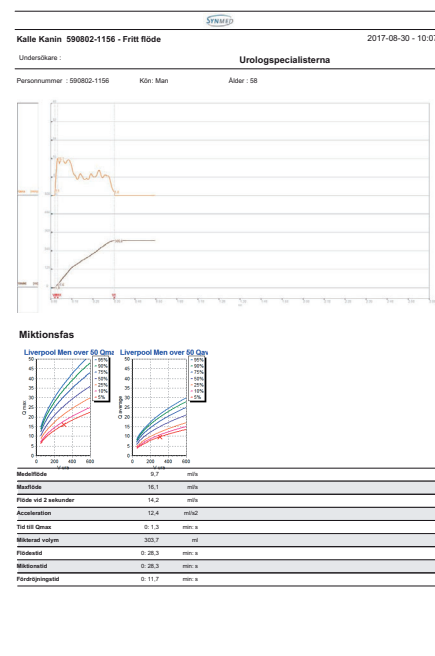

SynMed Medicinteknik AB
Læssøegade 3
DK-8600 Silkeborg

Tel: +45 53 55 01 00
Fax: +46 8 760 59 90
www.synmed.dk
info@synmed.dk

Fremstillet af:
Medkonsult M T s.r.o.
www.mmtsystems.com
info@mmtsystems.com

