

DANFLOW™ 1100

En moderne, trådløs urinflowmåler



Danflow™ 1100 er et enkelt og moderne system til flowmåling. Flowtransduceren overfører data via en unik, trådløs kommunikationsprotokol (866 MHz) til hovedenheden med indbygget thermoprinter. En komplet flowrapport skrives ud direkte med flow og volumen i samme kurve og data i talform.

Flowtransduceren i DanFlow™ 1100 systemet er udstyret med et lithiumbatteri, som ved normal drift kan anvendes i ca. 2 år. Flowtransduceren kan anvendes med et hæve-/ sænkbart stativ, men kan også sættes direkte på gulvet under en miktionsstol med trag. Der mulighed for at fæstne en sparkbeskytter på miktionsstolen, for at minimere risikoen for artefakter.

Hovedenheden i DanFlow™ 1100 systemet indeholder et SD-hukommelseskort, hvor undersøgelsen gemmes automatisk. Flowet kan fra dette ganske enkelt overføres til computer og konverteres til en pdf.fil, hvis du vil gemme undersøgelsen i et patientjournalsystem eller skrive den ud på arkivbestandigt A4 papir.

DanFlow™ 1100 tilbyder dig følgende fordele:

- Enkel og intuitiv hovedenhed som kan placeres på bord, hylde eller direkte på væggen
- Batteridrevet, trådløs flowmåler med lang drifttid
- Lang rækkevidde mellem flowtransducer og hovedenhed (op til 50 meter)
- Thermoprint rapport som viser både flow og volumen i samme kurve
- Enkel overføring af rapporter til PC til pdf.format til lagring eller udskrift

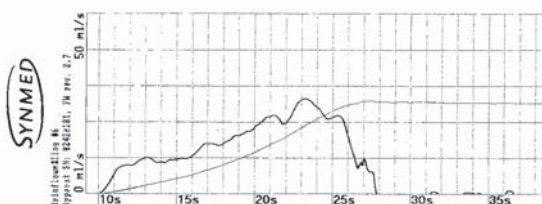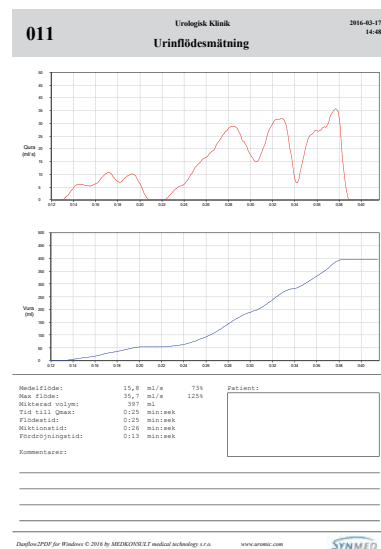

Resultat
 Dato: 06-09-2016 16:12
 Miktionstid: 26 s
 Flådetid: 10 s
 Tid til Qmax: 26 s
 Mediflow: 16,3 ml/s
 Mikteret volumen: 258 ml
 Patient: _____
 CPR nr: _____
 Navn: _____



SynMed Medicinteknik AB
 Læssøegade 3
 DK-8600 Silkeborg

Tel: +45 53 55 01 00
 www.synmed.dk
 info@synmed.dk

Fremstillet af:
 Medkonsult M T s.r.o.
 www.mmtsyste.ms.com
 info@mmtsyste.ms.com

