



VERSAFLEX™

pH kateter til måling af syrerefluks i esophagus


VersaFlex™ er udviklet til højkvalitets 24-timers pH-målinger i esophagus. Éngangs-antimonkateter med intern reference som er designet til enkel og smidig intubering. Smidigt men samtidig med den optimale stivhed som påfører patienten mindst muligt ubehag under undersøgelsen. Diameteren er kun 4,7F (1,6mm) hvilket gør kateteret anvendeligt til både børn og voksne.

VersaFlex™ er fuldstændigt latexfrit og røntgenfast (bariumfyldt) til anvendelse af gennemlysning. Sensoren er lineær i området pH 2-8, har en minimal drift og hurtig responstid.

Sierra Scientific Instruments har lang erfaring med at producere pH katetre med en produktion på mere end en million enheder siden 1994. Producenten har en meget strikt kvalitetskontrol og alle katetre testes individuelt i tre trin og mærkes herefter med et unikt serienummer for at sikre sporbarhed og pålidelige data, når du undersøger dine patienter.

VersaFlex™, styrker og fordele i store træk:

- Tyndt og smidigt kateter med intern reference
- Stort modelprogram fra 1 til 4 kanaler med forskellig afstand mellem sensorerne
- Findes også med større diameter – 6,4 F (2,1 mm)
- Tydelig afstandsmarkering fra 10 – 70 cm sikrer korrekt placering
- LES identificeringskanal findes som muligt tilvalg
- Modularkontakt RJ-45 med ekstra beskyttelse

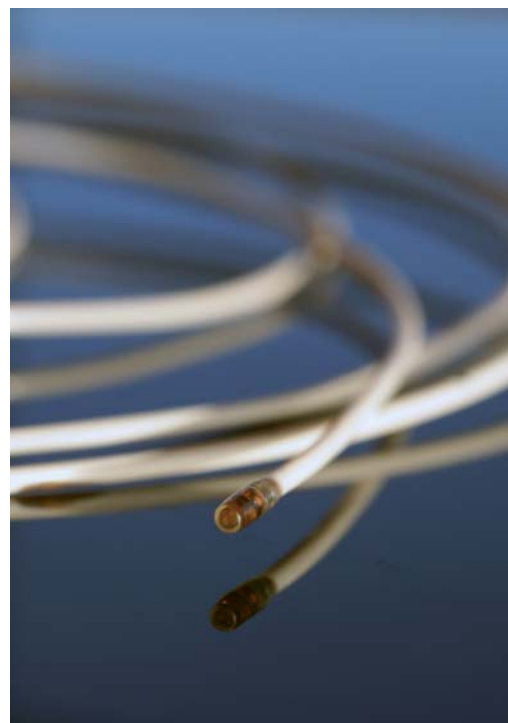

SynMed Medicinteknik AB
Læssøgade 3
DK-8600 Silkeborg

Tel: +45 53 55 01 00
www.synmed.dk
info@synmed.dk

Fremstillet af:
Sierra Scientific Instruments
www.sierrainst.com
info@sierrainst.com